

DATEN UND ERSATZTEILBLATT

F3272 STANDBRAUSE FÜR VE-WASSER.

Brausearmatur für die Schlusspülung mit VE-Wasser bei der manuellen Aufbereitung von Medizinprodukten zur Umsetzung der Empfehlung AK-Q-72 DGSV (Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung e.V.)




F3272 VE-ARMATUR MIT PENDELBRAUSE FÜR VE- UND TRINKWASSER IN EDELSTAHL.

Die Jänchen Standbrause für VE-Wasser ist für die manuelle Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten konzipiert. Die robuste Handbrause in Verbindung mit dem flexiblen federgeführten Schlauch ermöglicht eine effiziente und ergonomische Schlusspülung mit vollentsalztem Wasser (VE) in dem von der DGSV empfohlenen Reinigungsprozess.


Die VE-Armatur wird platzsparend am Beckenrand montiert. Die Standsäule und Schlauchlängen sorgen für eine angenehme Arbeitshöhe. Der Druckschlauch wird dabei in einer Spiralfeder geführt und bleibt so maximal flexibel. Die Kunststoff Handbrause mit Edelstahlventil verfügt über eine praktische Hebelarretierung.

Alle wasserführenden Teile, wie Armatur, Steigrohr und Ventile, sind spezialbeschichtet bzw. in Edelstahl ausgeführt. Damit wird der sonst übliche Materialabtrag bei dem Gebrauch von VE-Wasser verhindert.

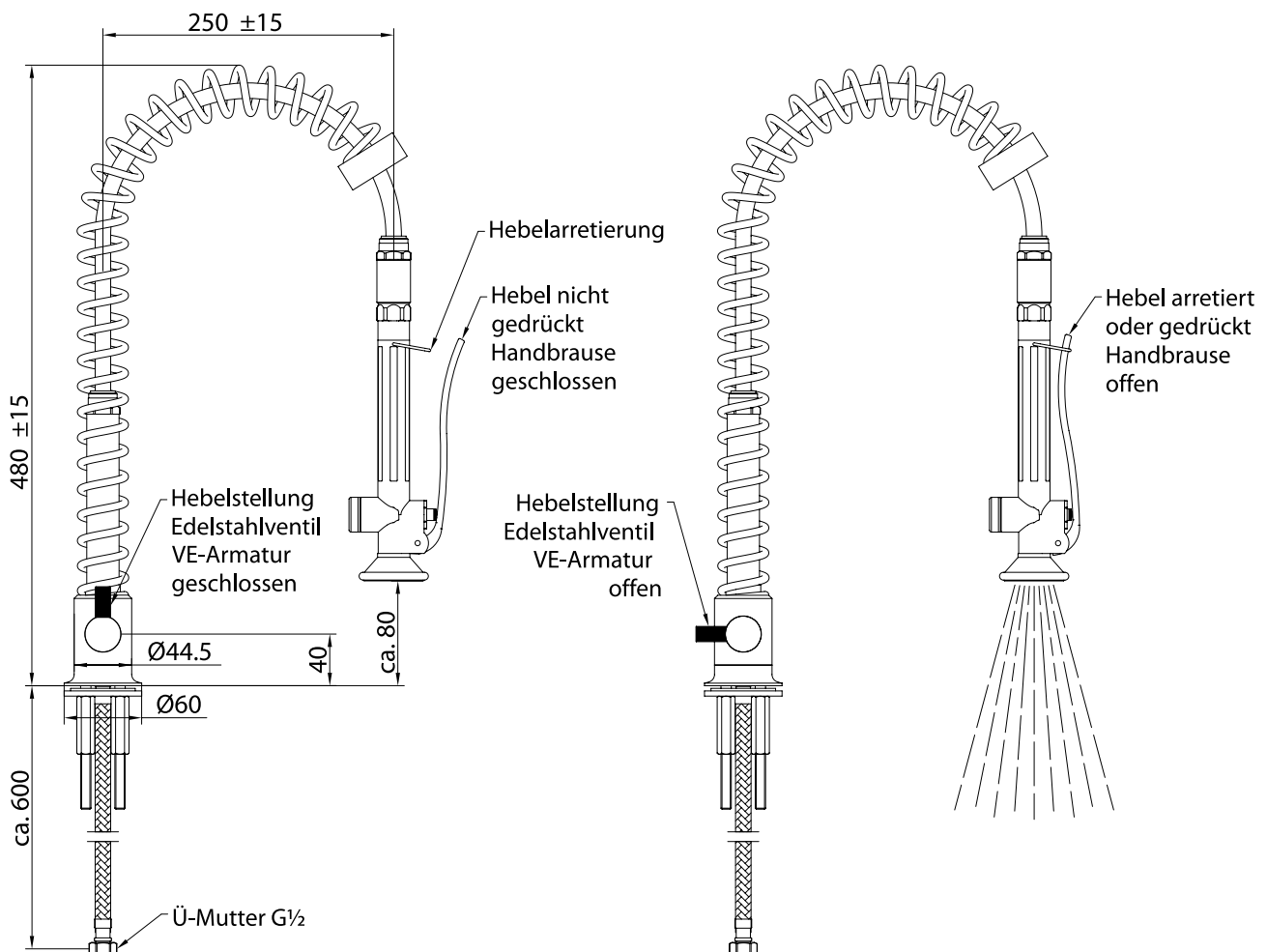


F3272 VE-ARMATUR MIT PENDELBRAUSE FÜR VE- UND TRINKWASSER IN EDELSTAHL.

Für die Jänchen VE-Armatur sind alle Komponenten auch einzeln als Ersatzteile erhältlich. Für die Erstausrüstung empfiehlt sich selbstverständlich das Ersteinbau-Set.

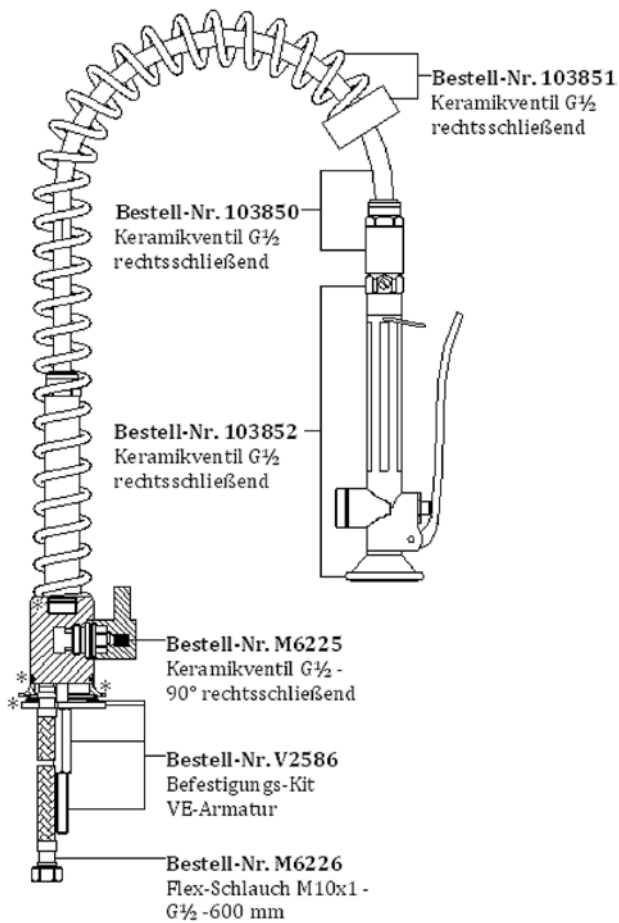


* Bestell-Nr. V2587 Dichtungssatz für VE-Armatur


Schlauch blau komplett mit Anschlüssen G $\frac{1}{2}$ I-A
Bestell-Nr.: 103850

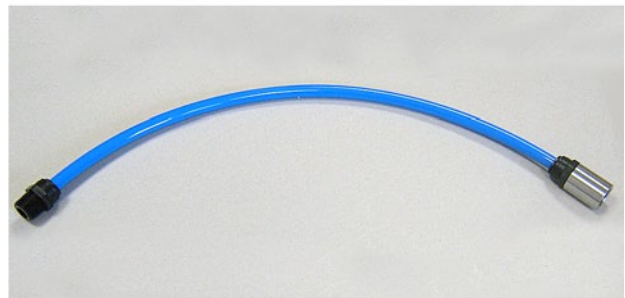


Spirale mit Gegenlager für VE-Armatur
Bestell-Nr.: 103851

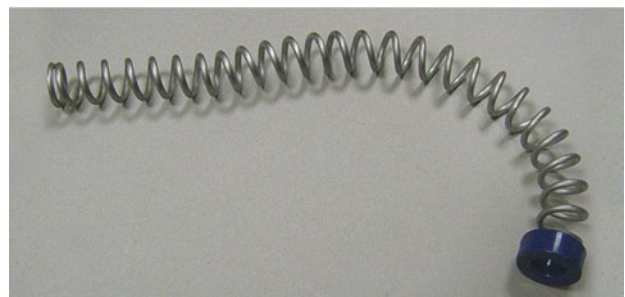


Handbrause, mit Metallbrausekopf, geeignet
für VE-Wasser
Bestell-Nr.: 103852

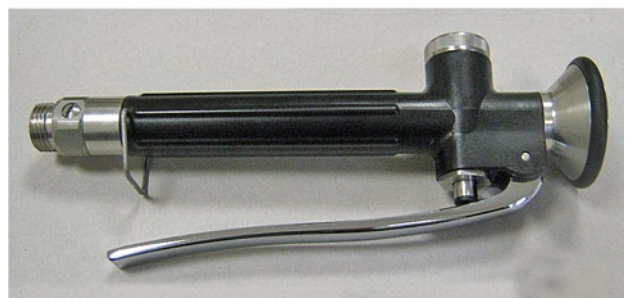

Keramikventil G. - 90° rechtsschließend
Bestell-Nr. M6225

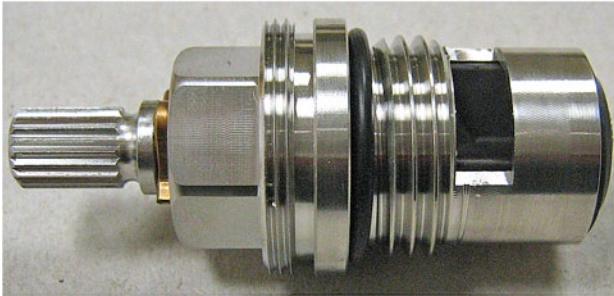


Befestigungs-Kit für VE-Armatur
Bestell-Nr. V2586

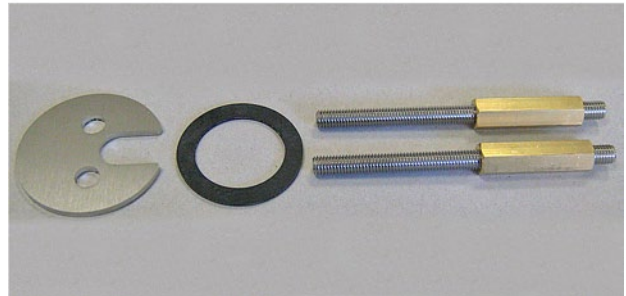

Flex-Schlauch – M10x1 – G. – 600 mm
Bestell-Nr. M6226



Dichtungssatz für VE-Armatur
Bestell-Nr. V2587

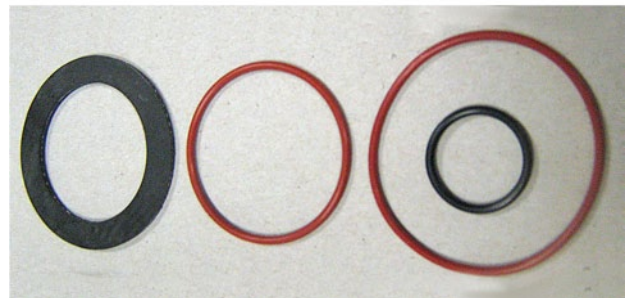

R.u.D. Jänchen Edelstahlzeugnisse GmbH
Malteserstraße 145-147
12277 Berlin
Telefon +49 (30) 723955-0
Fax +49 (30) 7212028
info@jaenchen.de
www.jaenchen.de